



ДентЛайт

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

В комплект монтажного набора входит:

- Стальные тросы длиной 1,5 м.
- Регуляторы длины подвеса с цанговым зажимом
- Крепление регулятора длины подвеса к потолку
- Анкерные болты

Местом установки светильника является потолок стоматологического кабинета. Потолок должен быть жестким и выдерживать статическую нагрузку весом не менее 50 кг.

Проводка для светильника должна быть выполнена силовым трехжильным кабелем, сечением провода не менее $1,5\text{мм}^2$. Источники питания выдерживают скачок электричества до 280 В.

1 этап.

Для начала нужно правильно расположить светильник (рис.1). Рекомендуем устанавливать на высоте 210-220 см от пола или от рабочей поверхности - 120 см (Рис.1). При опущенной спинке кресла, край светильника должен заходить немного дальше изголовья, это позволит осветить всю рабочую зону во время работы стоматолога, при разном расположении кресла (опущенном / поднятом).


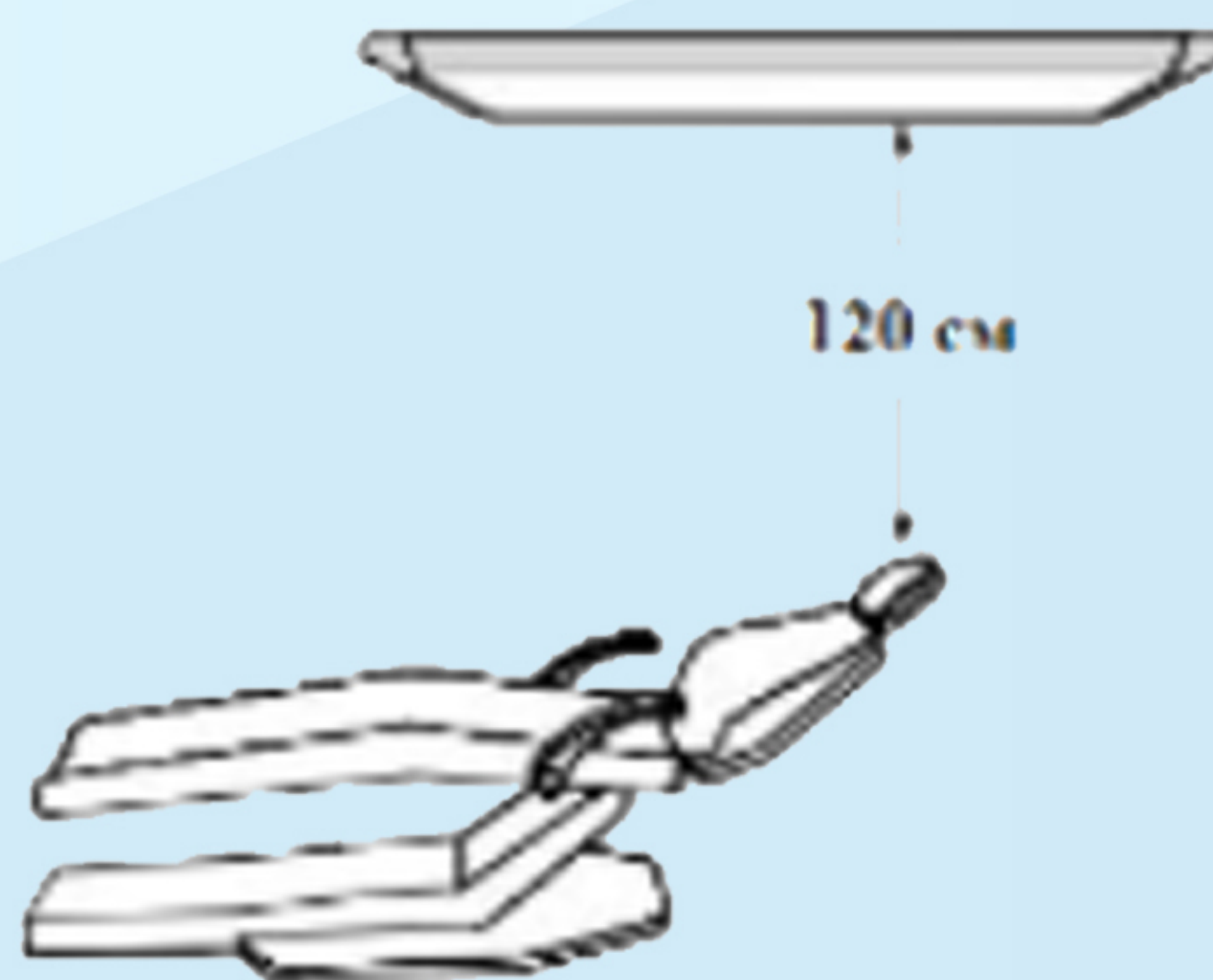


рис.1

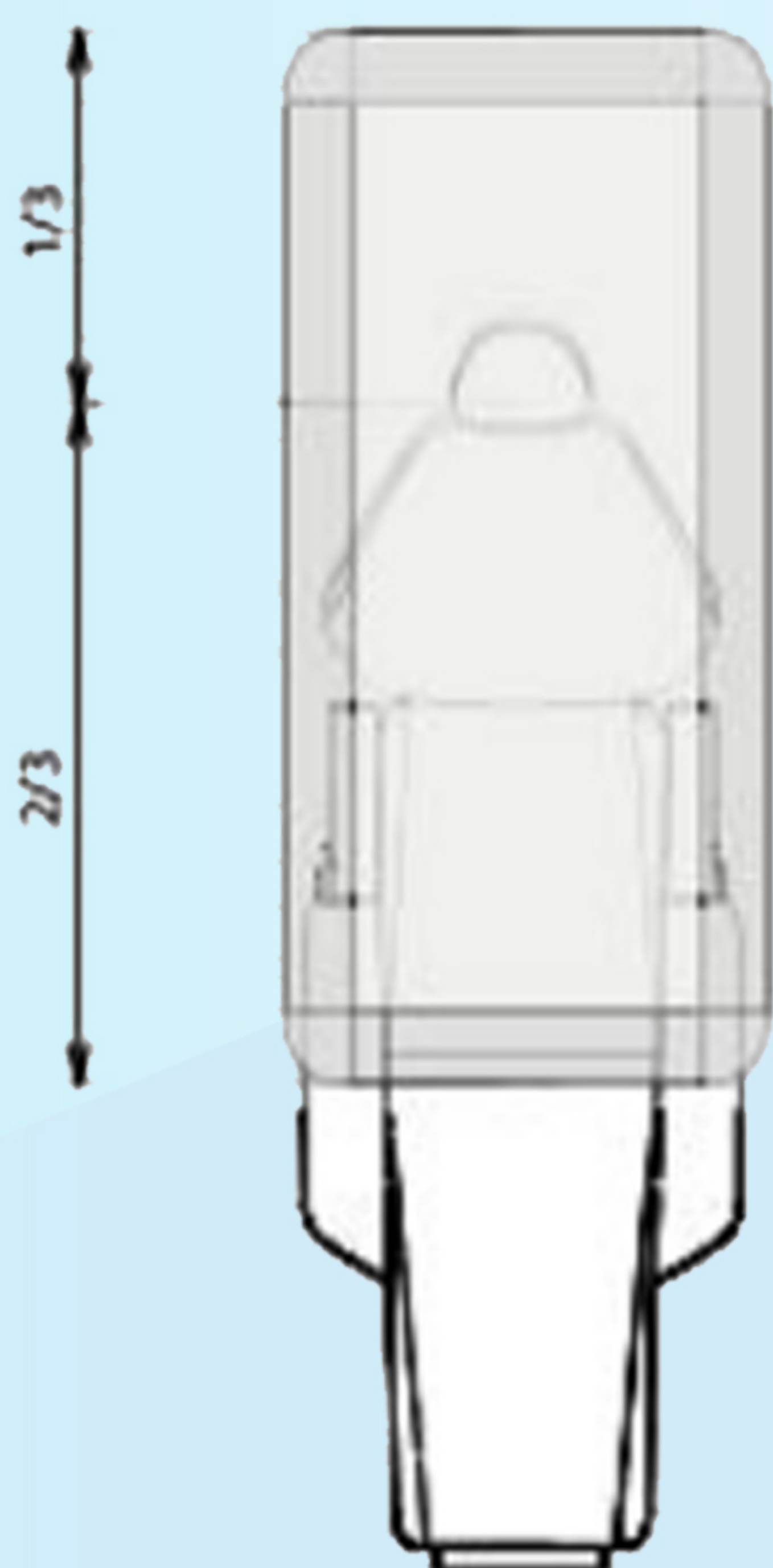


ДентЛайт

2 этап

Разметьте и просверлите в монтажной поверхности 4 отверстия для крепления регулятора длины подвеса.

3 этап

Присоедините регуляторы длины подвеса к креплениям и закрепите их гайками как показано на Рис.2.

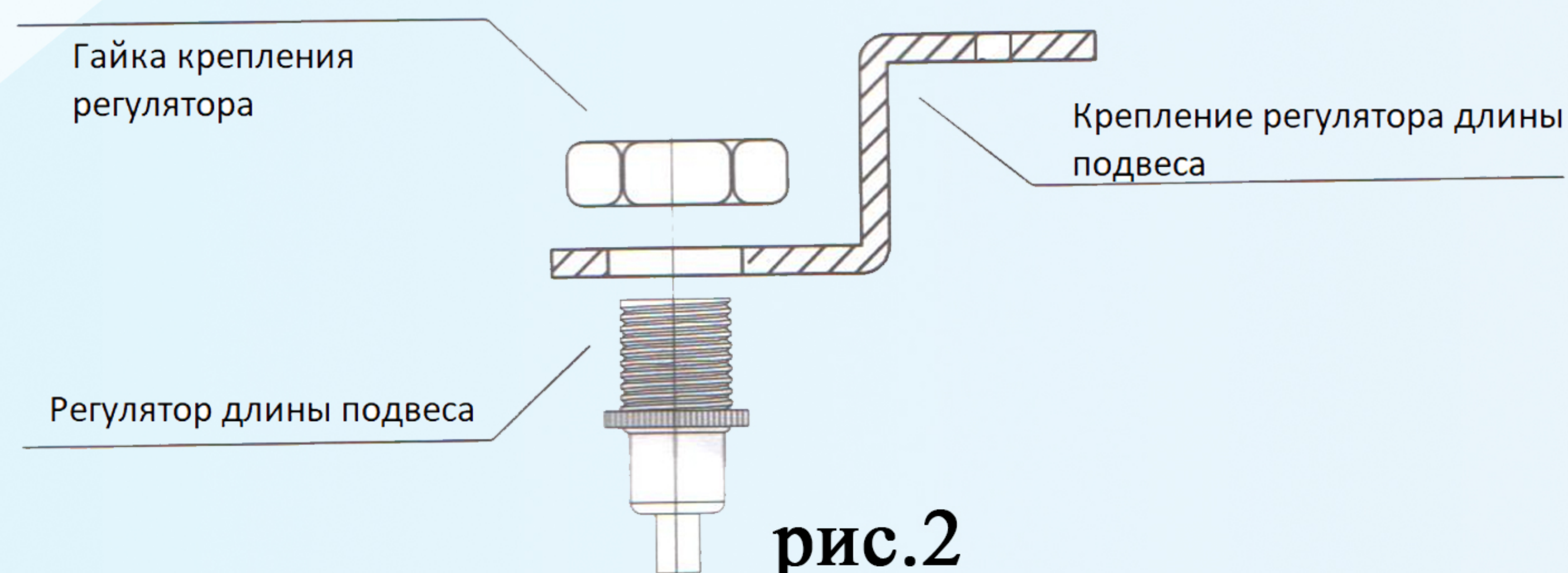

4 этап

Установите в просверленные отверстия анкерный болт и закрепите на монтажной поверхности элемент крепежа с помощью гайки (рис 3).



5 этап

Другой конец троса (со специальным стопорным элементом) нужно будет вкрутить в пазы на крышке корпуса светильника.

6 этап

Отрегулируйте требуемую высоту установки светильника с помощью цангового зажима регулятора. Для освобождения троса утапливайте малую втулку в корпус регулятора и регулируйте положение троса. Выровняйте светильник в горизонтальной плоскости.